

INVERDIA AB

Produkter för kompressionsbehandling

Kompressionsstrumpor

Strumpor för förband, antitrombos och sårbehandling

Stödstrumpor

Kompressionsärmar och handskar

Hjälpmedel för på- och avtagning av medicinska strumpor

Rådgivning och beställning

Sjukvårdsenheter

Inverdia har avtal avseende kompressionsstrumpor inklusive hjälpmedel till dessa med flera regioner. Kontakta oss, eller företrädare för er inköpsavdelning för att få information om vad som gäller för er region. Våra produkter finns i **Hjälpmedelstjänsten**.

www.inverdia.com

Här finns utförlig information om våra produkter avseende modeller, kompressionsklasser, storleksguider, färger m m.

www.inverdia.eu

Här kan sjukvårdsanställda öppna konto för rådgivning och överföring av kompletterande beställningsuppgifter (t ex måttuppgifter m m).

Privata kliniker och återförsäljare

Börja med att gå in på www.inverdia.com. Här finns kompletterande information till denna katalog och hur man begär inloggning till vår webbshop www.inverdia.shop.

Privatpersoner

Privatpersoner kan köpa från www.inverdia.shop utan inloggning samt med eventuell rabattkod.

INVERDIA kundtjänst

08.30-16.30 vardagar (lunchstängt 12.30-13.30)
08-6275044 info@inverdia.com www.inverdia.com

© inverdia

VARISAN

VENOLINE



Kompressionsstrumpor

En kompressionsstrumpa tillverkas efter kvalitetskrav och specifikationer som anges i en standard för kompressionsstrumpor. De vanligaste standarderna i Sverige är SS 872400:2012 (Swedish Standards Institute) och RAL-GZ 387/1 (Deutsches Institut für Gutesicherung und Kennzeichnung E.V.). Kompressionsstrumpan är tillverkad med tätare stickning där trycket ska vara högst (ankeln) och därifrån med en successivt avtagande stickning så att en gradient eller tryckprofil i riktning mot hjärtat föreligger. Tryckprofilen säkerställer att blod/ödemvätska transporteras tillbaka mot hjärtat för att ånyo ingå i blodcirkulationen.

En stödstrumpa är vilken strumpa som helst som ger stöd. Den behöver inte ha en särskild tillverkning utan kan vara gjord som en vanlig strumpa.

Kompressionsstrumpor som följer en tillverkningsstandard garanterar sjukvården en produkt som innebär optimal medicinsk behandling.

Kompressionsstrumpor tillverkas på två sätt, dels i runda varv med olika täthet på trådvarven enligt ovan (**rundstickade**) och dels på en flatbädd som sedan sys ihop med en söm (**flatstickade**). Rundstickade kompressionsstrumpor är enklare och därmed billigare att tillverka men är till viss del begränsade när det gäller möjliga utföranden till skillnad från flatstickade kompressionsstrumpor vilka har en mera komplicerad tillverkningsprocess och därmed är dyrare men möjliggör många specialanpassningar som ibland är nödvändiga vid avvikande anatomi eller svårare ödem. **För de flesta patienter ger rundstickade kompressionsstrumpor fullgod behandling.**


Kompressionsklasser och tryckprofiler

Kompressionsstrumpor tillverkas i olika kompressionsklasser med tillhörande tryckprofil. Beroende på diagnos väljs lämplig kompressionsklass/tryck för behandling av symptomen.

Kompressionsklass 1	tryck 18-21 mm Hg vid ankeln (mät punkt B)
Kompressionsklass 2	tryck 23-32 mm Hg vid ankeln (mät punkt B)
Kompressionsklass 3	tryck 34-46 mm Hg vid ankeln (mät punkt B)
Kompressionsklass 4	tryck >49 mm Hg vid ankeln (mät punkt B)


Tryckprofilen ska ligga på följande värden i % av trycket vid B:

Mätpunkter	B	B1	C	F eller G
Kompressionsklass 1	100	70-100	50-80	20-60
Kompressionsklass 2	100	70-100	50-80	20-50
Kompressionsklass 3	100	70-100	50-70	20-40
Kompressionsklass 4	100	70-100	50-70	20-40

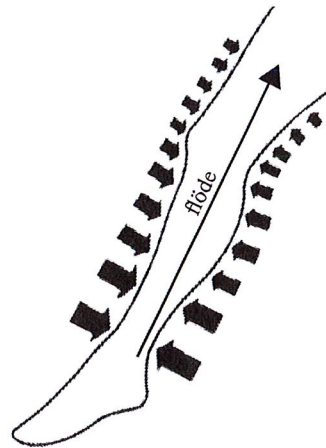

Mätpunkter ben

- T=midjan
- H=höfternas yttersta punkter
- K=grenens mittpunkt (ljusthöjd likvärdigt)
- G=5 cm nedom K när patienten är stående
- F=mitt på låret (mellan K och E)
- E=mitt över knäskålen och knävecket
- D=nivån nedom tuberositas tibiae (ca två fingerbredder nedom knäskålen)
- C=vadens största omkrets
- B1=nivån där vadmuskeln övergår till akillessenan
- B=ankelns minsta omkrets
- Y=hälens bakre punkt
- X=hålfoten
- A=fotsulan vid tåbasen
- Z=yttersta tåns spets
- c framför en mät punkt anger omkretsen vid mät punkten
- ℓ framför en mät punkt anger längden från fotsulans plan till mät punkten (alternativt mellan två mät punkter)

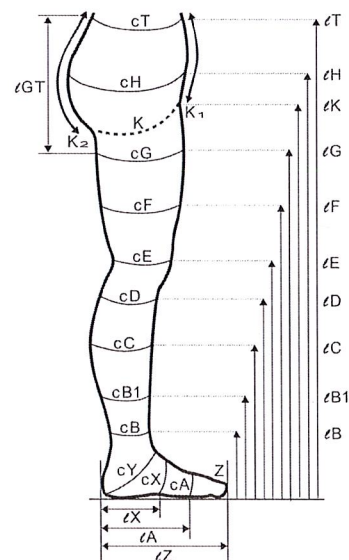

Utprovning av kompressionsstrumpor - steg för steg guide

1. Från **läkarordinationen** ska följande framgå:

- a. diagnos eller symptom
- b. omfattning av kompressionen (underben, hela benen etc)
- c. kompressionsklass

2. **Informera** till patienten

- a. syftet med kompressionsbehandlingen och hur den fungerar
- b. hur måttagningen går till

3. **Måttagning**

- a. hämta **blankett** från www.inverdia.com/kompressionsstrumpor/blanketter
- b. låt patienten ligga på en brits i lämplig höjd för bra ergonomi
- c. ta **omkretsmått** enligt måttblanketten, börja på högsta punkten (T strumpbyxa, G lårstrumpa, D knästrumpa), och markera varje mätställe med bläckpunkt (alternativt med plåsterbit)
- d. ta **längdmått** genom att hålla måttbandet sträckt och placera noll vid fotsulans plan (A) och sedan läsa av längden vid varje mätpunkt där omkretsmått tagits

4. **Strumpval**

- a. modell av strumpa följer av den ordinerade kompressionens omfattning
- b. gå in i vald strumpkvalitets **storlekstabell** med patientens **CB-mått** och välj storlek
- c. övriga omkretsmått och längdmått ska sedan ligga inom angivna intervall för den valda storleken, möjlighet finns att gå utanför angivet intervall och i så fall bör Inverdia rådfrågas
- d. stora omkretsmått och förekomst av ödem gör att kraftigare material i strumpan bör övervägas
- e. om patientens mått inte passar i **standardstorlek** väljs individuellt tillverkad strumpa (**måttbeställd** strumpa) och då sänds ifylld måttblankett till Inverdia

5. Ytterligare information till patienten

- a. när och hur patienten får strumporna
- b. hur man tar på strumporna (instruktion för **på- och avtagning samt skötselanvisning** medföljer alltid leveransen av strumpor)
- c. vilken effekt kan patienten förvänta sig av strumporna
- d. tidpunkt för återbesök och om det kan finnas skäl för patienten att tidigare återkomma om hur det går med behandlingen

6. Om patienten har **svårt att ta på strumporna**

- a. pröva i första hand med att använda gummihandskar eller noppvantar vilka ger bättre grepp om strumporna och dessutom minskar risken för nagelskador på strumporna
- b. nästa steg är att använda ett glidhjälpmedel (Easy-Slide, Eureka, Varislide) som både patienten och personal kan utnyttja för att underlätta påtagning
- c. metallställning (Venoline On) som strumpan dras på och patienten sedan sticker ned foten i samtidigt som patient med hjälp av handtag drar på strumpan är ett alternativ till glidhjälpmedel

7. Om patienten har **svårt att ta av strumporna**

- a. pröva i första hand med att använda gummihandskar eller noppvantar vilka ger bättre grepp om strumporna och dessutom minskar risken för nagelskador på strumporna
- b. nästa steg är att använda ett glidhjälpmedel (Eureka Off, Sim-Slide) för både patient och personal att utnyttja
- c. eller metallkrok (Venoline Off) som patienten kan sätta i strumpkanten och sedan föra strumpan över hälen och av foten

VARISAN FASHION

Kompressionsstrumpor


Kompressionsklasser: I (18-21 mm Hg vid ankeln)
II (23-32 mm Hg vid ankeln)

Material: 55/60 % polyamid, 45/40 % elastan


Tillverkningsstandard: RAL - GZ 387 medicinska kompressionsstrumpor

Indikationer: Kompression vid venös insufficiens, benödem
Kompression efter DVT



Egenskaper: Exceptionellt mjukt material ger extra god komfort
Hög luftpermeabilitet - huden kan "andas"

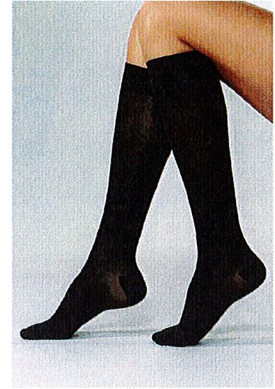

Modeller:

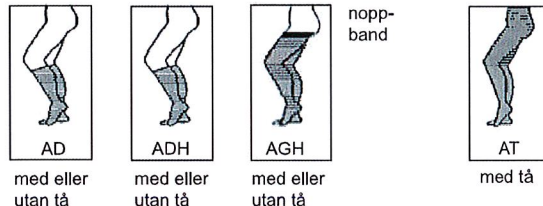


Färger:

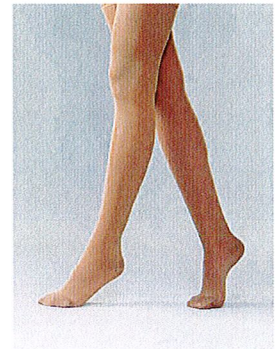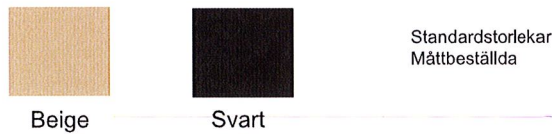

Storlekstabell:

VARISAN FASHION					
utgå alltid från cB vid val av storlek					
Längdmått (cm)	x-small (1)	small (2)	medium (3)	large (4)	x-large (5)
rG normal	74-82	74-82	74-82	74-82	74-82
rG kort	66-73	66-73	66-73	66-73	66-73
rD normal	42-48	42-48	42-48	42-48	42-48
rD kort	36-41	36-41	36-41	36-41	36-41
rA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
rZ	20-25,5	22-26,5	24-27,5	26-29	28-30
Omkremsmått (cm)					
cG	49-56	54-62	59-67	64-74	72-82
cE	33-39	37-44	42-49	46-53	50-58
cD	28-34	32-39	37-44	41-47	45-51
cC	29-35	33-40	38-45	42-48	46-52
cB	19-21	22-24	25-27	28-30	31-34
cY	28-30	31-33	34-36	37-39	40-43
cA	19-21	22-24	25-27	28-30	31-34

Produktfakta
Tunn icke-transparent rundstickad kvalitet
KI 1 medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745
Ökotex standard 100: Ej förekomst av skadliga textilier
Kompression enligt specifikationer garanterad i 6 mån från användningsstart
Maskintvätt 40 grader

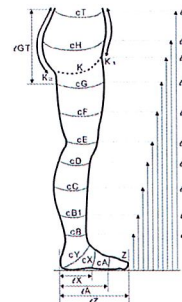

INVERDIA AB
Ekbacksvägen 20, 168 69 BROMMA
Tfn 08-627 50 44 Fax 08-28 58 22
E-post info@inverdia.com www.inverdia.com

VARISAN® är ett varumärke tillhörande
Cizeta Medicali, Italien

Inverdia kompression


VARISAN FASHION				Artikelnummer					
Kompressionsklass 1				XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	beställning
AD	beige	kort	u tå	FA3E16201	FA3E16202	FA3E16203	FA3E16204	FA3E16205	per par
			m tå	F23E16201	F23E16202	F23E16203	F23E16204	F23E16205	per par
		normal	u tå	FA3N16201	FA3N16202	FA3N16203	FA3N16204	FA3N16205	per par
			m tå	F23N16201	F23N16202	F23N16203	F23N16204	F23N16205	per par
	svart	kort	u tå	FA3E18621	FA3E18622	FA3E18623	FA3E18624	FA3E18625	per par
			m tå	F23E18621	F23E18622	F23E18623	F23E18624	F23E18625	per par
		normal	u tå	FA3N18621	FA3N18622	FA3N18623	FA3N18624	FA3N18625	per par
			m tå	F23N18621	F23N18622	F23N18623	F23N18624	F23N18625	per par
tillverkad enligt mått				FA3E1MTM					per st
ADH	beige	kort	u tå	FA3E196201	FA3E196202	FA3E196203	FA3E196204	FA3E196205	per par
			m tå	F23E196201	F23E196202	F23E196203	F23E196204	F23E196205	per par
		normal	u tå	FA3N196201	FA3N196202	FA3N196203	FA3N196204	FA3N196205	per par
			m tå	F23N196201	F23N196202	F23N196203	F23N196204	F23N196205	per par
	svart	kort	u tå	FA3E198621	FA3E198622	FA3E198623	FA3E198624	FA3E198625	per par
			m tå	F23E198621	F23E198622	F23E198623	F23E198624	F23E198625	per par
		normal	u tå	FA3N198621	FA3N198622	FA3N198623	FA3N198624	FA3N198625	per par
			m tå	F23N198621	F23N198622	F23N198623	F23N198624	F23N198625	per par
tillverkad enligt mått				FA3E19MTM					per st
AGH	beige	kort	u tå	FA3E96201	FA3E96202	FA3E96203	FA3E96204	FA3E96205	per par
			m tå	F23E96201	F23E96202	F23E96203	F23E96204	F23E96205	per par
		normal	u tå	FA3N96201	FA3N96202	FA3N96203	FA3N96204	FA3N96205	per par
			m tå	F23N96201	F23N96202	F23N96203	F23N96204	F23N96205	per par
	svart	kort	u tå	FA3E98621	FA3E98622	FA3E98623	FA3E98624	FA3E98625	per par
			m tå	F23E98621	F23E98622	F23E98623	F23E98624	F23E98625	per par
		normal	u tå	FA3N98621	FA3N98622	FA3N98623	FA3N98624	FA3N98625	per par
			m tå	F23N98621	F23N98622	F23N98623	F23N98624	F23N98625	per par
tillverkad enligt mått				FA3E9MTM					per st
AT	beige	kort	m tå	F23E56201	F23E56202	F23E56203	F23E56204	F23E56205	per st
			normal	F23N56201	F23N56202	F23N56203	F23N56204	F23N56205	per st
	svart	kort	m tå	F23E58621	F23E58622	F23E58623	F23E58624	F23E58625	per st
			normal	F23N58621	F23N58622	F23N58623	F23N58624	F23N58625	per st
tillverkad enligt mått				F23E5MTM					per st

Inverdia kompression

VARISAN FASHION				Artikelnummer					
Kompressionsklass 2				XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
AD	beige	kort	u tå	FA4E16201	FA4E16202	FA4E16203	FA4E16204	FA4E16205	per par
			m tå	F24E16201	F24E16202	F24E16203	F24E16204	F24E16205	per par
		normal	u tå	FA4N16201	FA4N16202	FA4N16203	FA4N16204	FA4N16205	per par
			m tå	F24N16201	F24N16202	F24N16203	F24N16204	F24N16205	per par
	svart	kort	u tå	FA4E18621	FA4E18622	FA4E18623	FA4E18624	FA4E18625	per par
			m tå	F24E18621	F24E18622	F24E18623	F24E18624	F24E18625	per par
		normal	u tå	FA4N18621	FA4N18622	FA4N18623	FA4N18624	FA4N18625	per par
			m tå	F24N18621	F24N18622	F24N18623	F24N18624	F24N18625	per par
	tillverkad enligt mått			FA4E1MTM					per st
ADH	beige	kort	u tå	FA4E196201	FA4E196202	FA4E196203	FA4E196204	FA4E196205	per par
			m tå	F24E196201	F24E196202	F24E196203	F24E196204	F24E196205	per par
		normal	u tå	FA4N196201	FA4N196202	FA4N196203	FA4N196204	FA4N196205	per par
			m tå	F24N196201	F24N196202	F24N196203	F24N196204	F24N196205	per par
	svart	kort	u tå	FA4E198621	FA4E198622	FA4E198623	FA4E198624	FA4E198625	per par
			m tå	F24E198621	F24E198622	F24E198623	F24E198624	F24E198625	per par
		normal	u tå	FA4N198621	FA4N198622	FA4N198623	FA4N198624	FA4N198625	per par
			m tå	F24N198621	F24N198622	F24N198623	F24N198624	F24N198625	per par
	tillverkad enligt mått			FA4E19MTM					per st
AGH	beige	kort	u tå	FA4E96201	FA4E96202	FA4E96203	FA4E96204	FA4E96205	per par
			m tå	F24E96201	F24E96202	F24E96203	F24E96204	F24E96205	per par
		normal	u tå	FA4N96201	FA4N96202	FA4N96203	FA4N96204	FA4N96205	per par
			m tå	F24N96201	F24N96202	F24N96203	F24N96204	F24N96205	per par
	svart	kort	u tå	FA4E98621	FA4E98622	FA4E98623	FA4E98624	FA4E98625	per par
			m tå	F24E98621	F24E98622	F24E98623	F24E98624	F24E98625	per par
		normal	u tå	FA4N98621	FA4N98622	FA4N98623	FA4N98624	FA4N98625	per par
			m tå	F24N98621	F24N98622	F24N98623	F24N98624	F24N98625	per par
	tillverkad enligt mått			FA4E9MTM					per st
AT	beige	kort	m tå	F24E56201	F24E56202	F24E56203	F24E56204	F24E56205	per st
			normal	F24N56201	F24N56202	F24N56203	F24N56204	F24N56205	per st
	svart	kort	m tå	F24E58621	F24E58622	F24E58623	F24E58624	F24E58625	per st
			normal	F24N58621	F24N58622	F24N58623	F24N58624	F24N58625	per st
	tillverkad enligt mått			F24E5MTM					per st

VARISAN TOP

Kompressionsstrumpor

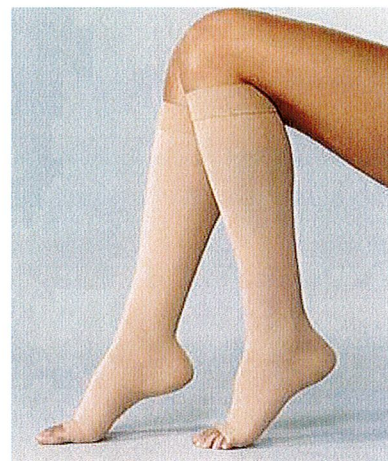

Kompressionsklasser: I (18-21 mm Hg vid ankeln)
 II (23-32 mm Hg vid ankeln)
 III (34-46 mm Hg vid ankeln)


Material innehåll: KI 1: 75 % polyamid, 25 % elasthan
 KI 2: 70 % polyamid, 30 % elasthan
 KI 3: 65 % polyamid, 35 % elasthan

Tillverkningsstandard: RAL - GZ 387 medicinska kompressionsstrumpor
 SS 872400:2012 medicinska kompressionsstrumpor

Indikationer: Kompression vid venös insufficiens, benödem
 Kompression efter DVT

Egenskaper: Kortelastisk i längdriktning - även lämplig vid svårare ödem
 Slitstark - lämplig för brukare med fysiskt arbete

Modeller:
 (storlekar och utförande enligt tabell över art nr)

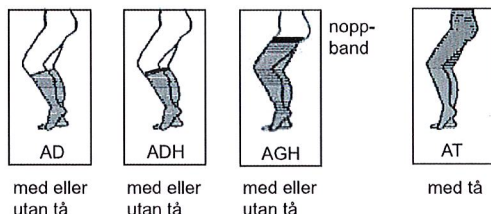

Färger:



Beige



Svart


Standardstorlekar
 Måttbeställda

Storlekstabell:

Storlekstabell		Standard: 5 storlekar i 2 längder			
Längd (cm)	storlek 1 (XS)	storlek 2 (S)	storlek 3 (M)	storlek 4 (L)	storlek 5 (XL)
normallång ϵ G	74-82	74-82	74-82	74-82	74-82
ϵ D	42-48	42-48	42-48	42-48	42-48
kort ϵ G	66-73	66-73	66-73	66-73	66-73
ϵ D	36-41	36-41	36-41	36-41	36-41
ϵ Z	20-25,5	22-26,5	24-27,5	26-29	28-30
ϵ A	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
Omkrets (cm)*					
cG	50-55 (-58)	53-58 (-61)	56-61 (-66)	60-66 (-70)	64-70 (-77)
cF	42-50	46-54	50-58	54-63	58-69
cE	35-41	38-45	41-49	45-53	49-58
cD	30-33 (-36)	33-36 (-39)	36-39 (-42)	39-42 (-46)	42-46 (-50)
cC	31-34 (-37)	34-37 (-40)	37-40 (-44)	40-44 (-48)	44-48 (-52)
cB	19-20	21-23	23-25	25-27	28-30
cY	28-30	30-32	32-35	34-37	37-40
cA	19-20	21-23	23-25	25-27	28-30

Maxmått enligt SS 872400:2012 angivna inom parentes.

Produktfakta
Kraftig rundstickad kvalitet
KI 1 medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745
Ökotex standard 100: Ej förekomst av skadliga textilier
Kompression enligt specifikationer garanterad i 6 mån från användningsstart
Maskintvätt 40 grader

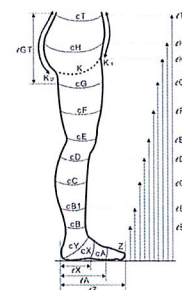

Inverdia kompression

VARISAN TOP				Artikelnummer					
Kompressionsklass 1				XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	beställning
AD	beige	kort	u tå	6A3E17391	6A3E17392	6A3E17393	6A3E17394	6A3E17395	per par
			m tå	623E17391	623E17392	623E17393	623E17394	623E17395	per par
		normal	u tå	6A3N17391	6A3N17392	6A3N17393	6A3N17394	6A3N17395	per par
			m tå	623N17391	623N17392	623N17393	623N17394	623N17395	per par
	svart	kort	u tå	6A3E18621	6A3E18622	6A3E18623	6A3E18624	6A3E18625	per par
			m tå	623E18621	623E18622	623E18623	623E18624	623E18625	per par
		normal	u tå	6A3N18621	6A3N18622	6A3N18623	6A3N18624	6A3N18625	per par
			m tå	623N18621	623N18622	623N18623	623N18624	623N18625	per par
tillverkad enligt mått				6A3E1MTM					per st
ADH	beige	kort	u tå	6A3E197391	6A3E197392	6A3E197393	6A3E197394	6A3E197395	per par
			m tå	623E197391	623E197392	623E197393	623E197394	623E197395	per par
		normal	u tå	6A3N197391	6A3N197392	6A3N197393	6A3N197394	6A3N197395	per par
			m tå	623N197391	623N197392	623N197393	623N197394	623N197395	per par
	svart	kort	u tå	6A3E198621	6A3E198622	6A3E198623	6A3E198624	6A3E198625	per par
			m tå	623E198621	623E198622	623E198623	623E198624	623E198625	per par
		normal	u tå	6A3N198621	6A3N198622	6A3N198623	6A3N198624	6A3N198625	per par
			m tå	623N198621	623N198622	623N198623	623N198624	623N198625	per par
tillverkad enligt mått				6A3E19MTM					
AGH	beige	kort	u tå	6A3E97391	6A3E97392	6A3E97393	6A3E97394	6A3E97395	per par
			m tå	623E97391	623E97392	623E97393	623E97394	623E97395	per par
		normal	u tå	6A3N97391	6A3N97392	6A3N97393	6A3N97394	6A3N97395	per par
			m tå	623N97391	623N97392	623N97393	623N97394	623N97395	per par
	svart	kort	u tå	6A3E98621	6A3E98622	6A3E98623	6A3E98624	6A3E98625	per par
			m tå	623E98621	623E98622	623E98623	623E98624	623E98625	per par
		normal	u tå	6A3N98621	6A3N98622	6A3N98623	6A3N98624	6A3N98625	per par
			m tå	623N98621	623N98622	623N98623	623N98624	623N98625	per par
tillverkad enligt mått				6A3E9MTM					
AGT	tillverkad enligt mått			6A3E2MTM					
AT	beige	kort	m tå	6235E7391	6235E7392	6235E7393	6235E7394	6235E7395	per st
			normal	m tå	6235N7391	6235N7392	6235N7393	6235N7394	6235N7395
	svart	kort	m tå	6235E8621	6235E8622	6235E8623	6235E8624	6235E8625	per st
			normal	m tå	6235N8621	6235N8622	6235N8623	6235N8624	6235N8625
tillverkad enligt mått				6235MTM					per st

Inverdia kompression

VARISAN TOP				Artikelnummer					
Kompressionsklass 2				XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
AD	beige	kort	u tå	6A4E17391	6A4E17392	6A4E17393	6A4E17394	6A4E17395	per par
			m tå	624E17391	624E17392	624E17393	624E17394	624E17395	per par
		normal	u tå	6A4N17391	6A4N17392	6A4N17393	6A4N17394	6A4N17395	per par
			m tå	624N17391	624N17392	624N17393	624N17394	624N17395	per par
	svart	kort	u tå	6A4E18621	6A4E18622	6A4E18623	6A4E18624	6A4E18625	per par
			m tå	624E18621	624E18622	624E18623	624E18624	624E18625	per par
		normal	u tå	6A4N18621	6A4N18622	6A4N18623	6A4N18624	6A4N18625	per par
			m tå	624N18621	624N18622	624N18623	624N18624	624N18625	per par
tillverkad enligt mått				6A4E1MTM					per st
ADH	beige	kort	u tå	6A4E197391	6A4E197392	6A4E197393	6A4E197394	6A4E197395	per par
			m tå	624E197391	624E197392	624E197393	624E197394	624E197395	per par
		normal	u tå	6A4N197391	6A4N197392	6A4N197393	6A4N197394	6A4N197395	per par
			m tå	624N197391	624N197392	624N197393	624N197394	624N197395	per par
	svart	kort	u tå	6A4E198621	6A4E198622	6A4E198623	6A4E198624	6A4E198625	per par
			m tå	624E198621	624E198622	624E198623	624E198624	624E198625	per par
		normal	u tå	6A4N198621	6A4N198622	6A4N198623	6A4N198624	6A4N198625	per par
			m tå	624N198621	624N198622	624N198623	624N198624	624N198625	per par
tillverkad enligt mått				6A4E19MTM					per st
AGH	beige	kort	u tå	6A4E97391	6A4E97392	6A4E97393	6A4E97394	6A4E97395	per par
			m tå	624E97391	624E97392	624E97393	624E97394	624E97395	per par
		normal	u tå	6A4N97391	6A4N97392	6A4N97393	6A4N97394	6A4N97395	per par
			m tå	624N97391	624N97392	624N97393	624N97394	624N97395	per par
	svart	kort	u tå	6A4E98621	6A4E98622	6A4E98623	6A4E98624	6A4E98625	per par
			m tå	624E98621	624E98622	624E98623	624E98624	624E98625	per par
		normal	u tå	6A4N98621	6A4N98622	6A4N98623	6A4N98624	6A4N98625	per par
			m tå	624N98621	624N98622	624N98623	624N98624	624N98625	per par
tillverkad enligt mått				6A4E9MTM					per st
AGT	tillverkad enligt mått			6A4E2MTM					
AT	beige	kort	m tå	6245E7391	6245E7392	6245E7393	6245E7394	6245E7395	per st
			normal	m tå	6245N7391	6245N7392	6245N7393	6245N7394	6245N7395
	svart	kort	m tå	6245E8621	6245E8622	6245E8623	6245E8624	6245E8625	per st
			normal	m tå	6245N8621	6245N8622	6245N8623	6245N8624	6245N8625

VARISAN TOP				Artikelnummer					
Kompressionsklass 3				XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
AD	beige	kort	u tå	6A5E17391	6A5E17392	6A5E17393	6A5E17394	6A5E17395	per par
			normal	u tå	6A5N17391	6A5N17392	6A5N17393	6A5N17394	6A5N17395
tillverkad enligt mått				6A5E1MTM					per st
ADH	tillverkad enligt mått			6A5E19MTM					per st
AGH	beige	kort	u tå	6A5E97391	6A5E97392	6A5E97393	6A5E97394	6A5E97395	per par
			normal	u tå	6A5N97391	6A5N97392	6A5N97393	6A5N97394	6A5N97395
tillverkad enligt mått				6A5E9MTM					per st
AGT	tillverkad enligt mått			6A5E2MTM					per st

LIPOCARE LIGHT


Kompressionsstrumpbyxa

Kompressionsklasser: II (23-32 mm Hg vid ankeln)


Material: 60 % polyamid, 40 % elastan

Indikationer: Behandling av lipödem i benen

Egenskaper: Känsla av effektiv kompression trots tunn kvalitet

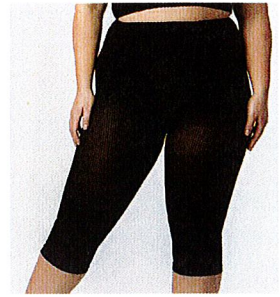

Capri

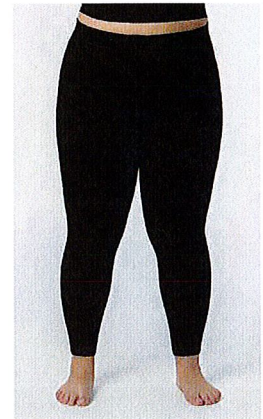

Leggings

Modeller:



CT



BT

Färg:




Standardstorlekar
Måttbeställda finns som
Varisan Flat

Storlekstabell:

LIPOCARE LIGHT						
utgå alltid från cC för capri och cB för leggings vid val av storlek						
Längdmått (cm)	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
∠G normal	74-82	74-82	74-82	74-82	74-82	74-82
∠G kort	66-73	66-73	66-73	66-73	66-73	66-73
Omkretsmått (cm)						
cG	45-55	50-60	55-65	60-71	66-78	73-85
cC	29-35	31-38	34-41	37-44	40-48	44-52
cB	18-20	20-22	22-25	25-28	28-31	31-34

LIPOCARE LIGHT						
artikelnummer						
Capri	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
normal	L4NCT8621	L4NCT8622	L4NCT8623	L4NCT8624	L4NCT8625	L4NCT8626
kort	L4ECT8621	L4ECT8622	L4ECT8623	L4ECT8624	L4ECT8625	L4ECT8626
Leggings						
normal	L4NBT8621	L4NBT8622	L4NBT8623	L4NBT8624	L4NBT8625	L4NBT8626
kort	L4EBT8621	L4EBT8622	L4EBT8623	L4EBT8624	L4EBT8625	L4EBT8626

Produktfakta
Tunn icke-transparent rundstickad kvalitet
KI 2 medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745
Ökotex standard 100: Ej förekomst av skadliga textilier
Kompression enligt specifikationer garanterad i 6 mån från användningsstart
Maskintvätt 40 grader

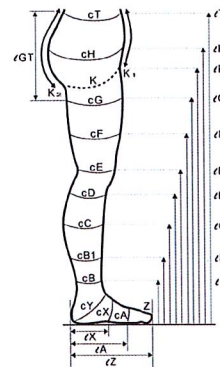

INVERDIA AB
Ekbacksvägen 20, 168 69 BROMMA
Tfn 08-627 50 44 Fax 08-28 58 22
E-post info@inverdia.com www.inverdia.com

LIPOCARE® är ett varumärke tillhörande Cizeta Medicali, Italien

Utbildning av kompressionsstrumpor via videomöte över internet

Vi erbjuder utbildning på kompressionsstrumpor. Denna är kostnadsfri för er som har leverantörsavtal med oss. Den genomförs online via video över internet. Allt ni behöver är en dator med tillgång till internet och epostadress. Om ni är flera personer så är det en fördel om ni har tillgång till en större bildskärm så att alla lätt kan följa utbildningen. Utbildningen vänder sig i första hand till er som är förskrivare/utprovare av medicinska kompressionsstrumpor för ben.



Målsättningen med **grundutbildningen** är att deltagare ska få tillräcklig kunskap inom området kompression för ben för att kunna ta mått och välja modell, storlek samt kvalitet beroende på brukarens behov. **Fortsättningsutbildningen** tar upp flatstickade kompressionsstrumpor mera ingående och när de är ett alternativ till rundstickade kompressionsstrumpor. För rådgivning och beställning av kompressionsstrumpor finns vår **beställningstjänst**, för vilken vi också erbjuder en kort utbildning.

Grundutbildning (ca 45 min)

- Skillnaden mellan stödstrumpor och medicinska kompressionsstrumpor
- Genomgång av våra olika produktkvaliteter, dess material och kompressionsklasser samt egenskaper
- Genomgång av de anatomiska mätpunkterna, vad de står för och var de är placerade
- Hur man tar mått på rätt sätt
- Hur man väljer rätt storlek utifrån produkternas storlekstabeller. När passar inte standardstorlekar av kompressionsstrumpor och när behöver man välja individuellt tillverkade (s k måttbeställda) kompressionsstrumpor?
- Hur man hittar produktblad och blanketter på Inverdias hemsida (<https://inverdia.com>).

Fortsättningsutbildning (ca 30 min)

- Skillnaden mellan rundstickade och flatstickade kompressionsstrumpor.
- Genomgång av vår flatstickade kvalitet och de olika val av anpassningar och specialutförande som finns.
- Hur man tar mått för flatstickade kompressionsstrumpor; t ex för insydda pelotter och sneda avslut.

Användning av Inverdias beställningstjänst (<https://inverdia.eu>)

- Hur man skaffar inloggning.
- Beskrivning av de olika delarna som behöver fyllas i för rådgivning och beställning.
- Hur man sparar patientuppgifter och hur man skickar förfrågan/beställning.

Kontakta oss för att boka en utbildning genom att skicka epost till order@inverdia.com eller ring 08-6275044.

